


XR9481PL・偏光板付きLED照明



アナライザー無し

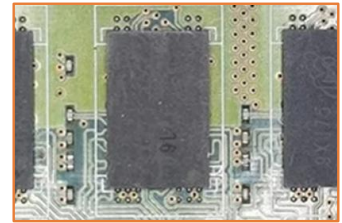

アナライザー有

偏光板を回転させることで、観察物表面の乱反射を抑え、コントラストが向上し見やすくなります。
金属部品、ガラス、プラスチック、ジュエリーなどの反射性の高い物体を観察に適しています。

【仕様】

商品名	実体顕微鏡用偏光板付きLED照明	商品番号	XR9481PL
発光色	白色		
鏡筒取付外径	MAX Φ60mm		
LED球	Φ3砲弾型高輝度LED 96球		
消費電力	6.2W (最高輝度時)		
明るさ	22,600lux (高さ108mm時) ※明るさは参考値となります。		
偏光板	ポラライザー360°回転式 / アナライザー脱着式		
調光機能	無段階調光式		
ケーブル長	120cm		
付属品	M49取付アダプター / ACアダプター (入力100V-240V対応)		
サイズ・重量	Φ83mm(W)×30mm(H)(突起部除く) / 160g (ACアダプター含む)		

株式会社カートン

〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-11-15

Tel:042-707-4402 F:042-707-4423 Email:kokunai@carton-opt.co.jp

