

2026 年 1 月 21 日

お取引先各位

株式会社 カートン

〒252-0234

神奈川県相模原市中央区共和 4-1-15

TEL : 042-707-4402 FAX : 042-707-4423

国内営業部 渡邊/野村



新商品 実体顕微鏡用偏光リング照明のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび弊社では、新商品として実体顕微鏡用偏光リング照明を発売する運びとなりました。

商品の詳細につきましては、別紙リーフレットをご高覧いただければ幸いです。
何卒ご検討賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- ① 商品名 : 実体顕微鏡用偏光リング照明
商品番号 : XR9481PL
仕 様 : 白色 LED 96 灯式
アナライザー (着脱式)
無段階調光式

販売開始日 : 2026 年 1 月 23 日

以上


<お問い合わせ先>

担当 : 国内営業部 渡邊/野村

TEL : 042-707-4402

メールアドレス : kokunai@carton-opt.co.jp

XR9481PL・偏光板付きLED照明

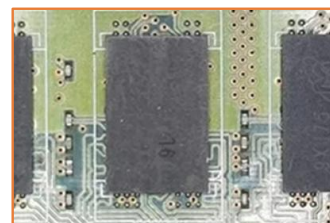

アナライザー無し



アナライザー有

偏光板を回転させることで、観察物表面の乱反射を抑え、コントラストが向上し見やすくなります。
金属部品、ガラス、プラスチック、ジュエリーなどの反射性の高い物体を観察に適しています。

【仕 様】

商 品 名	実体顕微鏡用偏光板付きLED照明	商 品 番 号	XR9481PL
発 光 色	白色		
鏡筒取付外径	MAX Φ60mm		
L E D 球	Φ3砲弾型高輝度LED 96球		
消 費 電 力	6.2W (最高輝度時)		
明 る さ	22,600lux (高さ108mm時) ※明るさは参考値となります。		
偏 光 板	ポラライザー360°回転式 / アナライザー脱着式		
調 光 機 能	無段階調光式		
ケ ー ブ ル 長	120 c m		
付 属 品	M49取付アダプター / ACアダプター (入力100V-240V対応)		
サイズ・重量	Φ83mm(W)×30mm(H)(突起部除く) / 160 g (ACアダプター含む)		

株式会社カートン

〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-11-15

Tel:042-707-4402 F:042-707-4423 Email:kokunai@carton-opt.co.jp

